

GlucoMen[®]LX₂

NYHET

Vår nya blodsockermätare GlucoMen LX2 har färgskärm och upplyst display. Den ger ökad trygghet genom att kunna göra både glukos- och ketonmätning.

Enkel, snabb, tydlig och noggrann.

Den upplysta färgskärmen med stora siffror ger dig tydliga värden med mycket hög noggrannhet (ISO approved 15197:2013). En minimal blodvolym minskar obehaget och risken för fel i samband med provtagningen elimineras av stickans inbyggda blodvolymkontroll. Mätningen tillhör de snabbaste på marknaden.



Olika färgsignaler för glukosvärden och ketonvärden ger en ökad tydlighet och minskar risken för feltolkning.

Mer kunskap.

Måltidsmarkeringar och aktivitetsmarkeringar bidrar till ökad kunskap om den individuella mät historiken och kan utnyttjas för behandlingen. Totalt kan 400 mätningar lagras i minnet, vilket gör det möjligt att se genomsnittsvärdet för blodsocker de senaste 1, 7, 14 och 30 dagarna. Ett alarm vid missad måltidsmätning bidrar också till ökad följsamhet till behandlingen.

Med färgskärm!



Färgskärm. Stor och distinkt färgskärm med belysning ger lätttydda värden.



Minimal blodvolym. Teststickan *GlucoMen LX Sensor* kräver endast 0,3 µL blod.



Blodvolymkontroll. Mätning startar vid rätt mängd blod. Minskar förbrukningen.



Kort mätningstid. Resultat supersnabbt och enkelt, efter bara 4 sekunder.




Markering. Markera dina resultat; före måltid, efter måltid eller träning.




Minne för 400 värden. Lagras automatiskt samt snittsvärdet för 1, 7, 14 och 30 dagar.



Alternativa stickställen
Provtagning som ger fingrarna en paus.

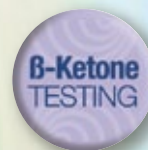

Test av ketoner. Mäter ketoner i blodet. Ingen kodning. Blodvolym 0,8 µL. Mättid 10 sek.

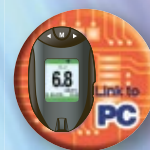

Överför data. Få grafer och diagram i din smartphone, dator eller läsplatta.



Överför dina värden till appar och få bättre koll på din diabetes.

Med Bluetooth-enheten GlucoLog B.T. Plus, kan du trådlöst överföra dina blodsockervärden från din blodsockermätare till en smartphone eller läsplatta. Med dina värden i en app får du en mer överskådlig dokumentation än t ex med en vanlig pappersdagbok. Dessutom har du alltid värdena tillgängliga i din telefon. Inmatningen är enklare och risken för felskrivning minskar.

Följande behövs för att överföra trådlöst:

- Blodsockermätaren GlucoMen LX 2
- GlucoLog B.T. Plus
- GlucoLog Lite (applikation)
- Smartphone och läsplatta (Android eller Apple med stöd för Bluetooth 4.0)



Funkar även till iPhone*

* GlucoLog B.T. Plus använder Bluetooth 4.0 (BT LE) som används av följande iPhones: 4s, 5, 5c, 5s, 6, och 6 Plus. Samt följande iPads: 3rd generation, mini, mini 2, mini 3, Air och Air 2.



- ✓ Upplyst färgdisplay med stora, tydliga siffror
- ✓ Färgmarkeringar för glukos- och ketonvärden
- ✓ Mätresultat för glukos erhålls på 4 sekunder
- ✓ Möjlighet att mäta ketoner i blodet.
- ✓ Möjlighet att överföra data till smartphone, dator eller läsplatta.
- ✓ Blodprovstagare för AST
- ✓ Måltidsmarkeringar
- ✓ Blodvolym glukos, endast 0,3 µL
- ✓ Blodvolymkontroll



Mätområde Blodsocker	1,1 to 33,3 mmol/L
Mätområde ketoner	0,1 to 8,0 mmol/L
Acceptabelt hematokritområde	25 - 60%
Mättid blodsocker	4 sekunder
Mättid ketoner	10 sekunder
Blodprovsvolym blodsocker	0,3 µL
Blodprovsvolym ketoner	0,8 µL
Batterier:	Två CR2450 (3V)
Batteriets varaktighet	1000 tester
Återstår vid indikation "lågt batteri"	Cirka 20 tester
Mätarens minneskapacitet	400 resultat
Medelvärden	1, 7, 14, 30 dagar
Brukstemperatur	5°C till 45°C
Luftfuktighet	10% till 90% icke-kondenserande
Diasendkompatibel	Ja
Mått:	58 x 98 x 17 mm (L x B x H)
Vikt:	75 g

f Gilla GlucoMen på Facebook
shop.menariniagnostics.se
www.diabetesappar.se

A. Menarini Diagnostics är ett hälsovårdsföretag med ett världsomspännande nätverk av dotterbolag, samarbetspartners och återförsäljare med fokus på diabetes, hematologi, klinisk kemi, urinanalys och immunologi. A. Menarini Diagnostics ingår som en division i Menarini-koncernen som är Italiens största internationella farmaceutiska bolag och marknadsledande i Sydeuropa. Menarini-koncernen har över 16000 anställda och en omsättning på ca 3 miljarder euro.

Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41,
 hus D, SE-205 12 Malmö. Tel 040-32 12 70

GlucoMen[®]LX₂

NYHET

Vår nya blodsockermätare GlucoMen LX2 har färgskärm och upplyst display. Den ger ökad trygghet genom att kunna göra både glukos- och ketonmätning.

Enkel, snabb, tydlig och noggrann.

Den upplysta färgskärmen med stora siffror ger dig tydliga värden med mycket hög noggrannhet (ISO approved 15197:2013). En minimal blodvolym minskar obehaget och risken för fel i samband med provtagningen elimineras av stickans inbyggda blodvolymkontroll. Mätningen tillhör de snabbaste på marknaden.



För att öka tydligheten och eliminera risk för feltolkning, visar färgskärmen olika färger vid glukos- och ketonmätning, samt vid extremt höga eller låga värden.

Mer kunskap.

Måltidsmarkeringar och aktivitetsmarkeringar bidrar till ökad kunskap om den individuella mätthistoriken och kan utnyttjas för behandlingen. Totalt kan 400 mätningar lagras i minnet, vilket gör det möjligt att se genomsnittsvärdet för blodsocker de senaste 1, 7, 14 och 30 dagarna. Ett alarm vid missad måltidsmätning bidrar också till ökad följsamhet till behandlingen.

Med färgskärm!



Färgskärm. Stor och distinkt färgskärm med belysning ger lätttydda värden.



Minimal blodvolym. Teststickan *GlucoMen LX Sensor* kräver endast 0,3 µL blod.



Blodvolymkontroll. Mätning startar vid rätt mängd blod. Minskar förbrukningen.



Kort mätningstid. Resultat supersnabbt och enkelt, efter bara 4 sekunder.




Markering. Markera dina resultat; före måltid, efter måltid eller träning.




Minne för 400 värden. Lagras automatiskt samt snittsvärdet för 1, 7, 14 och 30 dagar.



Alternativa stickställen
Provtagning som ger fingrarna en paus.

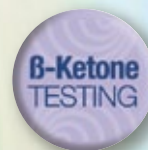

Test av ketoner. Mäter ketoner i blodet. Ingen kodning. Blodvolym 0,8 µL. Mättid 10 sek.

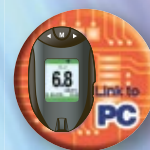

Överför data. Få grafer och diagram i din smartphone, dator eller läsplatta.

